

Scharlab Újdonságok

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Decemberi hírlevelünk zászlós hajója egy új víztisztító rendszer, ami méltán lesz népszerű partnereink körében. Minden laborban szükség van desztillált víz minőségű vízre és ez a készülék egyszerű, praktikus, megbízható és nagyon kedvező az ára.

V7-OLABVIZ Scharlab ECO RO víztisztító berendezés, általános laboratóriumi felhasználásra

Műszaki paramétereit:

- 30-50l/nap
- Víztisztítási elve: RO
- Négy lépcsős szűrés: 1. előszűrés, 2. szénműanyag (KDF+Ag), 3. ozmózis, 4. Sótalanító patron
- (a víz össz. oldott anyag (TDS) tartalma 0 ppm-re csökken, vezetőképessége kevesebb lesz,
- mint 0,1 uS/cm, az ellenállás pedig kb. 18 meg.ohm lesz, tehát gyakorlatilag teljes sótalanítás történik. A víz tisztasága 99.99%
- Mérőszondák: a bejövő és a kimenő megtisztított víz
- TDS értéket méri (összes oldott só tartalom).
- Baktérium elleni védelem: KDF-es + Ezüst szénműanyag,
- 12 óránként automatikusan átöblíti önmagát (nincs pangó víz).
- Átfolyós rendszer: Membránpumpa biztosítja az állandó nyomást,
- nincs szükség tartályra (kis helyen elfér).
- Intelligens vezérlés: Méri a felhasznált víz mennyiségét, szűrők élettartamát,



- a víz összetételét (biztonságos), van benne vízszivárgás érzékelő,
- megfelelő víznyomás figyelő és időfelhasználás érzékelő (6 perc után automatikusan leáll).
- Wi-Fi: Maga a víztisztító rendelkezik Wi-Fi adóval (nincs szüksége internetre)
- és ez által csatlakozik a felhasználó bármilyen okos eszközével (telefon, tab, laptop, smart tévék, stb.).
- A felhasználó minden adatot leolvashat az okos eszközéről. Ezeket az információkat egy LCD kijelzőn is olvashatjuk.
- Teljesítmény: 30 liter/óra
- 220 V, 36W (működés közben)
- Méretek: H43cm×Sz11cm×41cm
- Súly:12 kg
- Kivitel: Fémházas, szinterezett, lézer kivágások, kék LED-es megvilágítás és rozsdamentes lemezborítások teszik még esztétikusabbá.
- Szűrők kapacitása: 5.000 liter
- Biztonsági szerviz funkciók:
 - vízszivárgás érzékelő (aranyozott, korrózióálló)
 - vízhiány érzékelő
 - szűrő cserejelző
 - státusz OK felirattal jelzi a felhasználónak, hogy minden jól működik.
 - amikor a szűrő élettartama lejár, a készülék nem indul újra, ezzel elkerülve a baktériumokkal teli, koszos szűrőkön való vízfogyasztást
 - illetéktelen szervizesek ellen, védett kóddal van ellátva (csak a szerviz általi kóddal indul újra a készülék).
- A termelt tiszta víz a tápvíz mennyiségének **70%-a**.

Akciós ár: 214 000Ft+ÁFA

A készülék helyszíni installációt és betanítást igényel, melynek ára függ a távolságtól, de nem lehet több, mint nettó **26 000 Ft**.

CISA akció!

Minden decemberben beérkező rendelés esetén:

*CISA laboratóriumi sziták és szitarázók árából **10%** kedvezményt tudunk biztosítani.*



Decemberi akciós Scharlab márkájú termékünk:

073-001123 Szűrőegység, komplett, 47 mm-es membránhoz, "all glass" (Scharlau) üveg, szűrőpohár 250ml, palack 1000ml, Fém csipesz


Kényelmesen használható komplett rendszer, nem igényel szerelést.

A minta nem érintkezik műanyag dugóval, így szerves anyagok vizsgálatára is alkalmas

Akciós ár: 57 410FT+ÁFA



Praktikus sarok rovatunk e havi termékei az univerzál indikátorpapírok.

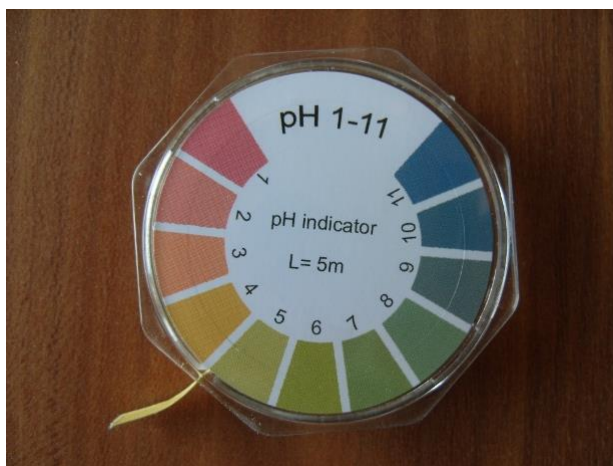

F000142461 Univerzál indikátorpapír pH 1-11 tekercses 5m 1 tekercs/csomag

Akciós ár: 1 550Ft+ÁFA

F000142459 Univerzál indikátorpapír pH 1-14 tekercses 5m 1 tekercs/csomag

Akciós ár: 1 550Ft+ÁFA

Ha nem látszik pontosan a színváltás, a megoldás a több skálás univerzál indikátor papír:

1562-1013C Univerzál indikátorpapír pH 0-14, 100db tesztcsík/doboz

A pontosabb leolvashatóság érdekében három különböző színskálán jelzi a mért pH értéket.

Akciós ár: 2 420Ft+ÁFA



Ha még biztosabb eredményt szeretne, a négyskálás a megoldás:

**F000142413 Négyskálás univerzál indikátorpapír
pH 0-14 csík, méret 6 x 80mm, 100 csík/csomag**

Akciós ár: 2 450Ft+ÁFA



A hírlevélben feltüntetett áraink nettó egységárak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.
A kiszállítás nettó 35.000Ft felett díjmentes, alatta 2.500Ft+ÁFA

Elérhetőségeink: Scharlab Magyarország Kft.

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

e-mail: info@scharlab.hu

tel.: (88) 787-634, fax: (88) 781-081